

Istruzioni per il prelievo di capelli con bulbo

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per il DNA profiling su **campione non convenzionale**: il DNA viene estratto dalle cellule che circondano il bulbo pilifero. Per questo motivo i capelli devono essere strappati dal cuoio capelluto, e non tagliati o raccolti da pettine o spazzola.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- una bustina di raccolta per ogni individuo che si sottopone al test;
- etichette con codice a barre;
- busta per la spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Maneggiare i capelli con le **mani pulite e asciutte**. Per l'analisi del DNA è indispensabile che alla base del capello sia presente il bulbo, cioè la radice.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, le bustine con i capelli vanno conservate e spedite a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- le bustine con i capelli, etichettate con i dati di ciascun partecipante;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

Il ritiro del campione con corriere è gratuito e compreso nel prezzo del test.

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito **www.dnasalus.it/fermopoint** per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: **www.dnasalus.it/tracking**
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?

1. Collegati al sito **www.dnasalus.it/ritiro** per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere alla pagina **www.dnasalus.it/referti-online**
2. Cliccare su **"Consulta il tuo referto"**
3. La consultazione è **gratuita** e sempre disponibile
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio. Un campione senza bulbo non è analizzabile.



1. Lavare e asciugare bene le mani prima di iniziare.



2. **Strappare, non tagliare**, da 5 a 10 capelli prendendoli vicino alla cute, con un gesto deciso, così da staccarli con il bulbo radicale ancora attaccato.

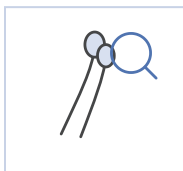

3. Verificare che alla base di ogni capello sia visibile il **bulbo**, un piccolo rigonfiamento chiaro. I capelli spezzati a metà o caduti spontaneamente non sono utilizzabili.



4. Riporre i capelli nella bustina fornita, applicare l'etichetta con il codice a barre e scrivere a penna a chi si riferisce il prelievo.

Inserire le bustine etichettate nella scatola del kit, allegando il modulo di consenso informato firmato in ogni sua parte.

Ripetere la procedura con una bustina diversa per ogni partecipante al test, senza mai mescolare i campioni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- I capelli raccolti dal pettine, dalla spazzola o dal cuscino non contengono il bulbo e non sono analizzabili.
- L'analisi di campione non convenzionale è da considerarsi non standard: i tempi di refertazione possono subire variazioni.
- Non inserire nella stessa bustina capelli di persone diverse.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

CODICE UTENTE

ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata