

Istruzioni per il prelievo con tampone cutaneo

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per lo studio della popolazione batterica presente sulla pelle (microbiota cutaneo), a partire da un tampone raccolto a casa sulla zona da analizzare. Il prelievo non è invasivo ed è completamente indolore.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- un tampone sterile con provetta e liquido di conservazione;
- etichette con codice a barre;
- busta per la spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Nelle ore precedenti il prelievo **non applicare creme, cosmetici o disinfettanti** sulla zona da campionare e non lavare l'area subito prima.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- la provetta con il tampone, chiusa ed etichettata;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

Il ritiro del campione con corriere è gratuito e compreso nel prezzo del test.

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito **www.dnasalus.it/fermopoint** per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: **www.dnasalus.it/tracking**
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?

1. Collegati al sito **www.dnasalus.it/ritiro** per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere alla pagina **www.dnasalus.it/referti-online**
2. Cliccare su **“Consulta il tuo referto”**
3. La consultazione è **gratuita** e sempre disponibile
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;


*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.




1. Lavare accuratamente le mani prima di iniziare.

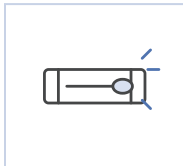

2. Estrarre il tampone sterile dalla confezione **senza toccarne la punta in cotone**.

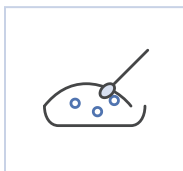

3. Passare il tampone con una **leggera pressione** sulla zona di pelle da analizzare, strofinando e ruotandolo per circa 20-30 secondi.

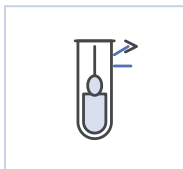

4. Inserire subito il tampone nell'apposita provetta e spezzare l'asta in corrispondenza del segno, chiudendo con il tappo.

Applicare l'etichetta con il codice a barre sulla provetta, riporla nella busta insieme al modulo di consenso firmato e spedire il kit.

Indica sul modulo la zona del corpo da cui proviene il campione: il referto ne tiene conto nel confronto con i profili di riferimento.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Non disinfettare la zona prima del prelievo: eliminerebbe proprio i batteri che il test deve analizzare.
- Non prelevare da una zona con ferite aperte o lesioni in corso senza averne parlato prima con un medico.
- Non appoggiare il tampone su altre superfici una volta eseguito il prelievo.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

CODICE UTENTE

ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata