

Istruzioni per il prelievo con tampone oculare

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per l'analisi molecolare dei microrganismi presenti nella congiuntiva, a partire da un tampone oculare raccolto a casa. Il prelievo è rapido e non richiede strumenti oltre a quelli forniti.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- un tampone sterile con provetta e liquido di conservazione;
- etichette con codice a barre;
- busta per la spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Rimuovere le **lenti a contatto**. Non applicare colliri, pomate o trucco sull'occhio da campionare nelle ore precedenti il prelievo, salvo diversa indicazione del medico.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- la provetta con il tampone, chiusa ed etichettata;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

Il ritiro del campione con corriere è gratuito e compreso nel prezzo del test.

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito **www.dnasalus.it/fermopoint** per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: **www.dnasalus.it/tracking**
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
1. Collegati al sito **www.dnasalus.it/ritiro** per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere alla pagina **www.dnasalus.it/referti-online**
2. Cliccare su **"Consulta il tuo referto"**
3. La consultazione è **gratuita** e sempre disponibile
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.


Procedura di raccolta del campione

È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio. Se avverti dolore intenso, calo della vista o forte fastidio alla luce, rivolgiti subito a un oculista invece di eseguire il prelievo a casa.


CODICE UTENTE




1. Lavare accuratamente le mani prima di iniziare.

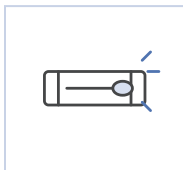

2. Estrarre il tampone sterile dalla confezione **senza toccarne la punta in cotone**.

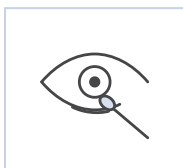

3. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore e passare il tampone sulla **congiuntiva**, cioè la parte interna della palpebra, dell'occhio interessato, ruotandolo con delicatezza.

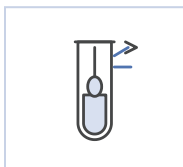

4. Inserire subito il tampone nell'apposita provetta e spezzare l'asta in corrispondenza del segno, chiudendo bene con il tappo.

Applicare l'etichetta con il codice a barre sulla provetta, riportarla nella busta insieme al modulo di consenso firmato e spedire il kit.

Se l'infezione interessa entrambi gli occhi, indica chiaramente sul modulo da quale occhio proviene il campione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Non toccare la cornea, cioè la parte trasparente al centro dell'occhio: il tampone va passato solo sulla congiuntiva.
- Non riutilizzare lo stesso tampone su entrambi gli occhi.
- Il referto non sostituisce la visita oculistica: non iniziare né sospendere colliri di tua iniziativa.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata