

Istruzioni per la raccolta del campione di urina

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per l'analisi molecolare dei microrganismi presenti nelle vie urinarie a partire da un campione di urina raccolto a casa. La raccolta non è invasiva e non richiede alcuna preparazione particolare oltre a quella indicata.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- un contenitore sterile per la raccolta dell'urina;
- etichette con codice a barre;
- busta per la spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Raccogliere preferibilmente le **prime urine del mattino**. Lavare accuratamente mani e genitali esterni con acqua e asciugare con cura prima di iniziare.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta raccolto, il campione va spedito il prima possibile. Se la spedizione non avviene in giornata, conservarlo in frigorifero.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- il contenitore chiuso ed etichettato;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuata con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

Il ritiro del campione con corriere è gratuito e compreso nel prezzo del test.

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito **www.dnasalus.it/fermopoint** per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: **www.dnasalus.it/tracking**
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?

1. Collegati al sito **www.dnasalus.it/ritiro** per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere alla pagina **www.dnasalus.it/referti-online**
2. Cliccare su **"Consulta il tuo referto"**
3. La consultazione è **gratuita** e sempre disponibile
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.



1. Lavare accuratamente le mani e i genitali esterni con acqua, asciugando con cura.



2. Aprire il contenitore sterile fornito **senza toccarne l'interno né il bordo** e appoggiare il coperchio con la parte interna rivolta verso l'alto.

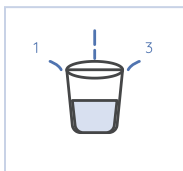

3. Iniziare a urinare nel water, poi raccogliere il **getto intermedio** direttamente nel contenitore, senza riempirlo del tutto. Completare la minzione nel water.



4. Chiudere bene il contenitore, applicare l'etichetta con il codice a barre e riportarlo nella busta fornita insieme al modulo di consenso.

Chiudere la busta e spedire il kit secondo le modalità indicate in questo foglio.

Se stai seguendo una terapia antibiotica, non sospenderla di tua iniziativa: chiedi al medico curante quando ha senso raccogliere il campione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Non raccogliere il primo getto: per questa analisi serve il mitto intermedio.
- Non toccare l'interno del contenitore o del coperchio: il campione risulterebbe contaminato.
- Non raccogliere il campione durante il ciclo mestruale.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

CODICE UTENTE

ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata